


Abena Man Formula 2

INCONTINENCE

ABENA® Man



ABRI-MAN Premium

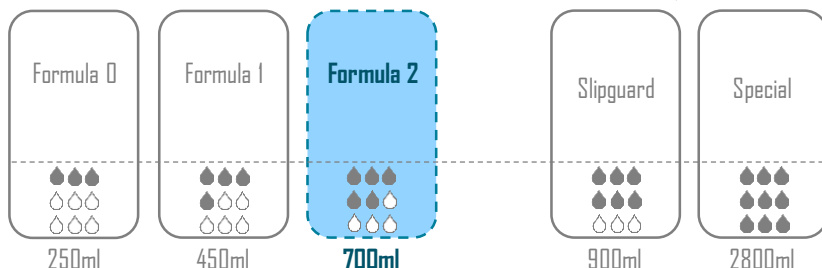

UTILISATEURS

AUTONOME

INCONTINENCE LÉGÈRE

PROTECTION MASCULINE



Top Dry - Effet garde-au-sec

La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et le voile externe supérieur. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi à la surface interne du change de rester sèche.



Forme anatomique

Les protections Abena Man ont été conçues pour s'adapter à la morphologie masculine, limitant ainsi le risque de fuites.



Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.



Air Plus - Voile externe respirant

Le voile externe laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.



Bords anti-fuites

Les bords anti-fuites hydrophobes sont situés au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.


DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% Fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF-free)
Couche d'acquisition	Couche d'acquisition et de distribution en non-tissé
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Ailes	Polypropylène hydrophobe
Elastiques	Elasthane, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant (BTBS)
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates



Abena Man Formula 2

DIMENSIONS PRODUIT

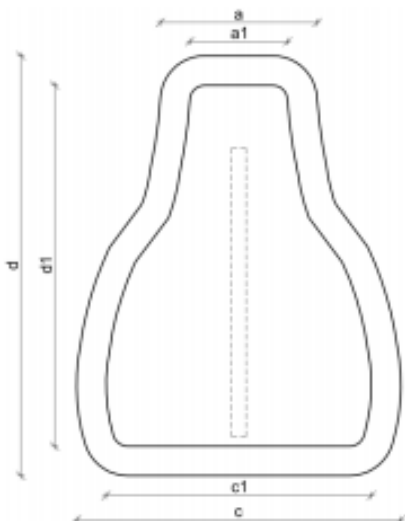

d	Longueur	290 mm
c	Largeur, devant	230 mm
a	Largeur, arrière	100 mm

Cœur absorbant

d1	Longueur	250 mm
c1	Largeur, devant	70 mm
a1	Largeur, arrière	180 mm

ABSORPTION

Poids produit : 24 g

Test Rothwell ISO 11948-1	700 ml
---------------------------	--------



Dispositif médical Classe I
93/42/CEE



Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de
l'utilisateur et de son
environnement



Label FSC
Cellulose provenant de
forêts responsables



Testé dermato-
logiquement
Produits sans risques d'irritation



ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001:2008

Management de la santé
et de la sécurité au
travail




GMP
Good Manufacturing
Practices

DONNÉES LOGISTIQUES




Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
12	15	180	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
21	1,240 m		
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 382260		57 03538 382277	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
58 x 23,6 x 36,2 cm	5110 g	4440 g	23 x 9 x 28 cm

GUIDE D'UTILISATION

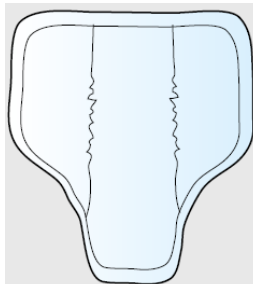

Déplier la protec-
tion. Ne pas tou-
cher la surface
intérieure de la
protection.

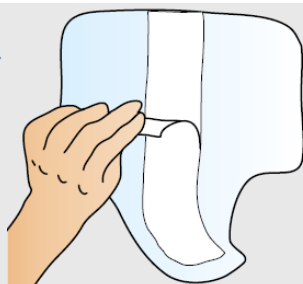

Retirer le papier
recouvrant la
bande adhésive.



Positionner la pro-
tection à l'intérieur
du sous-vêtement
bien ajusté, en
plaçant la partie
la plus large sur le
devant.

